


H I D R O T E R A P I A

sumérgase en un mundo de bienestar

FREIXANET
WELLNESS PROJECTS



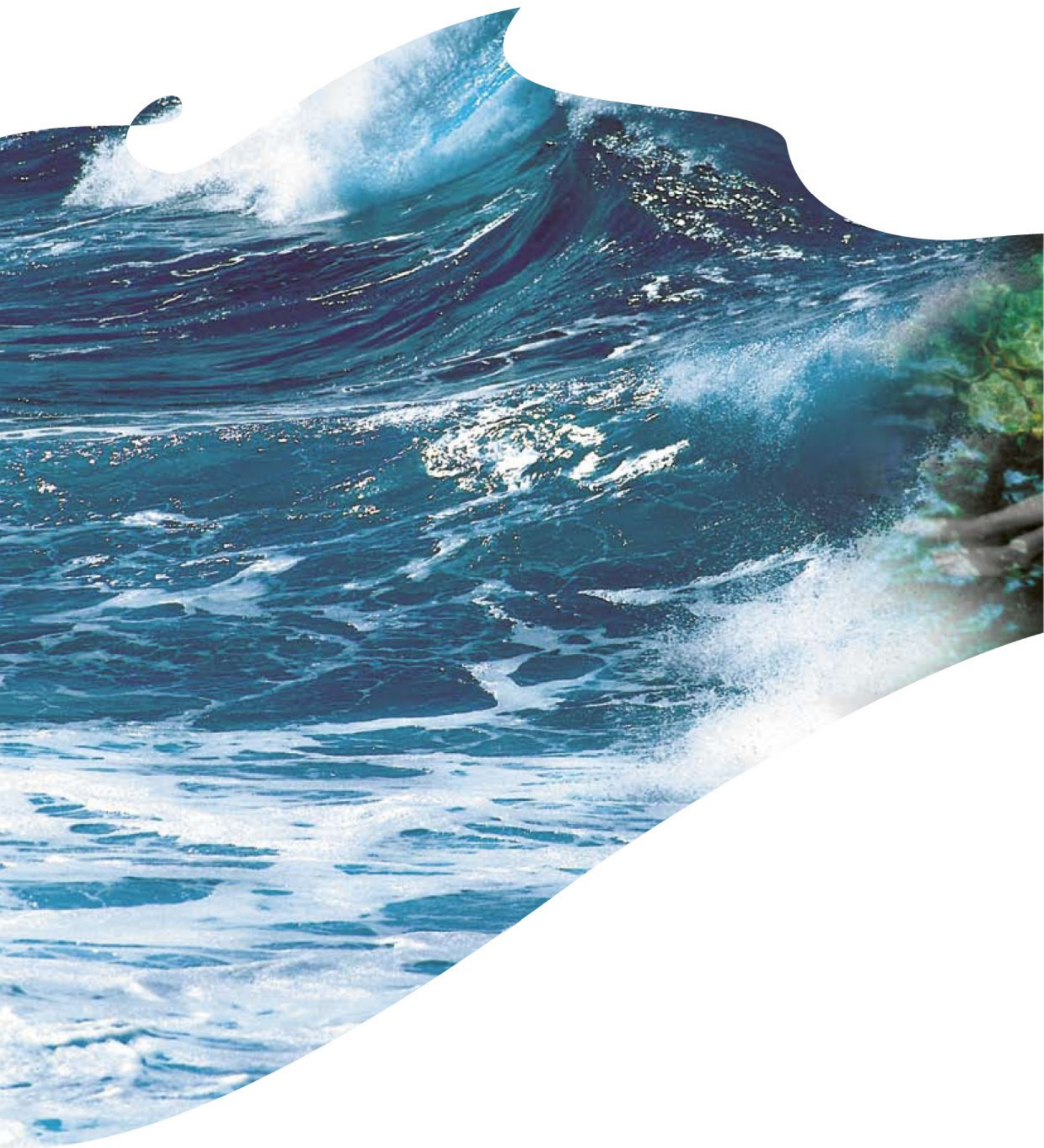

 **FREIXANET**
WELLNESS PROJECTS

TRAUTWEIN
phys. Therapie · Wellness · Sauna und Physioanlagen



Las bañeras Trautwein le proporcionarán las sensaciones más agradables y relajantes, combinando confort y diseño con la tecnología más avanzada.

Los modelos Florida, Atlantis, Royal, Crystal y California, fruto de avanzados estudios de diseño y la colaboración con hospitales y terapeutas, son excelentes combinaciones de relax y salud, que proporcionan a su cuerpo los efectos más beneficiosos para conseguir un saludable bienestar físico.

Juegos de jets y boquillas soplantes consiguen estudiados efectos de masaje, y dan como resultado el mejor tratamiento para mejorar su estado físico. Trautwein convierte el agua en un elemento de salud y bienestar destinado a proporcionarle el máximo confort.

Combinaciones de colores en el agua para una eficaz cromoterapia, efectos musicales para fines terapéuticos, y ondas magnéticas en el agua que crean campos de armoniosa energía; son opciones que en algunos modelos aportan nuevas dimensiones de relax para experimentar los efectos de las técnicas terapéuticas más modernas.

DIANE 100



	DIANE 100
Capacidad (l)	220
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2160x900x730
Suministro eléctrico	230V / 50Hz / 1,1kW
Funcionamiento de la bomba (l/min)	250
Nº de jets	60
Canales de jets	3
Llenado automático	-
Programa de aclarado	-
Cromoterapia	-
Altavoces	-
Iluminación indirecta LED del revestimiento	-

DIANE 100

Bañeras para tratamientos de hidroterapia y talasoterapia.

Bañeras acrílicas con forma anatómica con apoyabrazos para tratamientos en posición sentada y estirada. Disponen de dos puntos de luz LED que van combinando los colores blanco, azul, verde y rojo.

Colores de la bañera y del revestimiento: según nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalación:

Toma de agua fría de ¾" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de ¾" a nivel del suelo.

Conexión eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, corriente 230 V / 50 Hz (tensión especial 240 V / 60 Hz).

Desagüe con rejilla antioloros de Ø70 (100) mm y entrada lateral adicional de Ø50, utilizada simultáneamente como desagüe de la habitación.

Llave de paso del agua fría y caliente.

Instalación eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 78 cm.

Carga por superficie: 260 Kg/m².

Peso: 200 Kg.

El suelo debajo de la bañera debe nivelarse.



FLORIDA 100



Bañeras para tratamientos de hidroterapia y talasoterapia. Proporcionan un masaje subacuático en 5 zonas corporales mediante 144 jets. Bañeras acrílicas con forma anatómica con apoyabrazos para tratamientos en posición sentada y estirada. Colores de la bañera y del revestimiento: según nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalación (Florida 100 / Florida 300):

Toma de agua fría de ¾" a nivel del suelo.
Toma de agua caliente de ¾" a nivel del suelo.
Conexión eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, corriente 230 V / 50 Hz (tensión especial 240 V / 60 Hz).
Desagüe con rejilla antioloros de Ø70 (100) mm y entrada lateral adicional de Ø50, utilizada simultáneamente como desagüe de la habitación.
Llave de paso del agua fría y caliente.
Instalación eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.
Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 78 cm (Florida 100) / 85 cm (Florida 300).
Peso: 200 Kg (Florida 100) / 210 Kg (Florida 300).
Carga por superficie: 280 Kg/m².
El suelo debajo de la bañera debe nivelarse.

	FLORIDA 100	FLORIDA 300
Capacidad (l)	220	220
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2160x900x730	2300x900x780
Suministro eléctrico	230V / 50Hz 2,3kW	230V / 50Hz 2,3kW
Funcionamiento de la bomba (l/min)	400	400
Nº de jets (opción)	144 (172)	144 (172)
Canales de jets	10	10
Bombas de los jets de agua	1	1
Llenado automático	Opcional	Opcional
Programa de aclarado	Opcional	Opcional
Cromoterapia	Opcional	Opcional
Altavoces	Opcional	Opcional
Manguera de masaje	Opcional	Opcional
Iluminación indirecta LED del revestimiento	No disponible	Opcional
Mecanismo de emergencia	Opcional	Opcional

FLORIDA 100 / FLORIDA 300



FLORIDA 300

ATLANTIS 500



ATLANTIS 500 / ROYAL 600

	ATLANTIS 500	ROYAL 600
Capacidad (l)	220	220
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2300x900x780	2300x900x780
Suministro eléctrico	400V / 50Hz 4 kW	400V / 50Hz 4 kW
Funcionamiento de la bomba (l/min)	850	850
Nº de jets (opción)	172 (230)	252
Canales de jets	16	16
Bombas de los jets de agua	8	8
Llenado automático	Opcional	Estándar
Programa de aclarado	Opcional	Estándar
Cromoterapia	Opcional	Estándar
Altavoces	Opcional	Opcional
Manguera de masaje	Opcional	Opcional
Iluminación indirecta LED del revestimiento	Opcional	Opcional
Mecanismo de emergencia	Opcional	Opcional

Bañeras para tratamientos de hidroterapia y talasoterapia.

Bañeras acrílicas con forma anatómica con apoyabrazos para tratamientos en posición sentada y estirada.

Colores de la bañera y del revestimiento: según nuestra carta de colores. La bañera Royal 600 dispone de 80 LEDs, integrados en la pared de la bañera, de 4 colores cambiantes (rojo, azul, verde, amarillo) regulables a intervalos de 15 segundos, o permanentes.

Requisitos en el lugar de la instalación (Atlantis 500 / Royal 600):

Toma de agua fría de ¾" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de ¾" a nivel del suelo.

Conexión eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, 400 V.

Desagüe con rejilla antiolores de Ø70 (100) mm y entrada lateral adicional de Ø50, utilizada simultáneamente como desagüe de la habitación.

Llave de paso del agua fría y caliente.

Instalación eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 85 cm.

Peso: 240 Kg (Atlantis 500) / 250 Kg (Royal 600).

El suelo debajo de la bañera debe nivelarse.



ROYAL 600

CRYSTAL SOLO



La bañera Crystal está disponible en dos versiones: Crystal Solo para una persona, o Crystal Duett para dos personas. Ambas son bañeras acrílicas con forma ergonómica para terapia con frecuencia sonora, luces de colores y campo magnético. El revestimiento es de una pieza, de material plástico, y con tapa de inspección. Color del revestimiento: según nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalación (Crystal Solo / Crystal Duett):

Toma de agua fría de ½" a nivel del suelo.
 Toma de agua caliente de ½" a nivel del suelo.
 Desagüe con rejilla antiolores y entrada lateral adicional de Ø40/50.
 Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 75 cm.
 Carga por superficie: 260 Kg/m².
 Peso: 80 Kg (Crystal Solo) / 120 Kg (Crystal Duett).
 El suelo debajo de la bañera debe nivelarse.
 Consultar requisitos eléctricos.



	CRYSTAL SOLO	CRYSTAL DUETT
Capacidad (l)	190	220 (1 persona) 190 (2 personas)
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	1800x800x710	1900x1000x730
Suministro eléctrico	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Accesorios de la bañera	<p>80 diodos luminosos integrados, para cromoterapia (colores: rojo, amarillo, verde, azul).</p> <p>Equipo electrónico para terapia de frecuencia sonora, con conexión al sistema de audio en el lugar de la instalación.</p> <p>Dos bobinas magnéticas con unidad electrónica de control, para la terapia de campo magnético.</p> <p>Asas para su seguridad.</p> <p>Batería de llenado integrada, compuesta de un termostato de 1/2", potencia nominal de 48 l/min, y válvula conmutadora para las funciones de llenado de la bañera, de ducha de mano y de apagado.</p> <p>Una combinación de desagüe excéntrico y rebosadero.</p> <p>Almohada para la cabeza (<i>Crystal Solo: 1 unidad, Crystal Duett: 2 unidades</i>).</p>	

CRYSTAL SOLO / CRYSTAL DUETT



CRYSTAL DUETT

CALIFORNIA 100



	CALIFORNIA 100	CALIFORNIA TWIN
Capacidad (l)	220	330
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2160x900x730	2300x1300x750
Suministro eléctrico	230V / 50Hz 1,1kW	230V / 50Hz 2,3kW
Funcionamiento de la bomba (l/min)	250	400
Nº de jets	60	120
Canales de jets	3	6
Bombas de los jets de agua	1	1
Llenado automático	Estándar	Estándar
Cromoterapia	Estándar	Estándar
Masaje acústico a través del agua	Estándar	Estándar
Iluminación indirecta LED del revestimiento	Opcional	Opcional
Mecanismo de emergencia	Opcional	Opcional

CALIFORNIA 100 / CALIFORNIA TWIN

Bañeras para tratamientos de hidroterapia y talasoterapia.

Bañeras acrílicas con forma anatómica con apoyabrazos para tratamientos en posición sentada y estirada.

Disponen de dos puntos de luz LED que van combinando los colores blanco, azul, verde y rojo.

Colores de la bañera y del revestimiento: según nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalación (California 100 / California Twin):

Toma de agua fría de ¾" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de ¾" a nivel del suelo.

Conexión eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, corriente 230 V / 50 Hz (tensión especial 240 V / 60 Hz).

Desagüe con rejilla antiolores de Ø70 (100) mm y entrada lateral adicional de Ø50, utilizada simultáneamente como desagüe de la habitación.

Llave de paso del agua fría y caliente.

Instalación eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 78 cm.


Carga por superficie: 260 Kg/m².

Peso: 200 Kg (California 100).

El suelo debajo de la bañera debe nivelarse.



CALIFORNIA TWIN

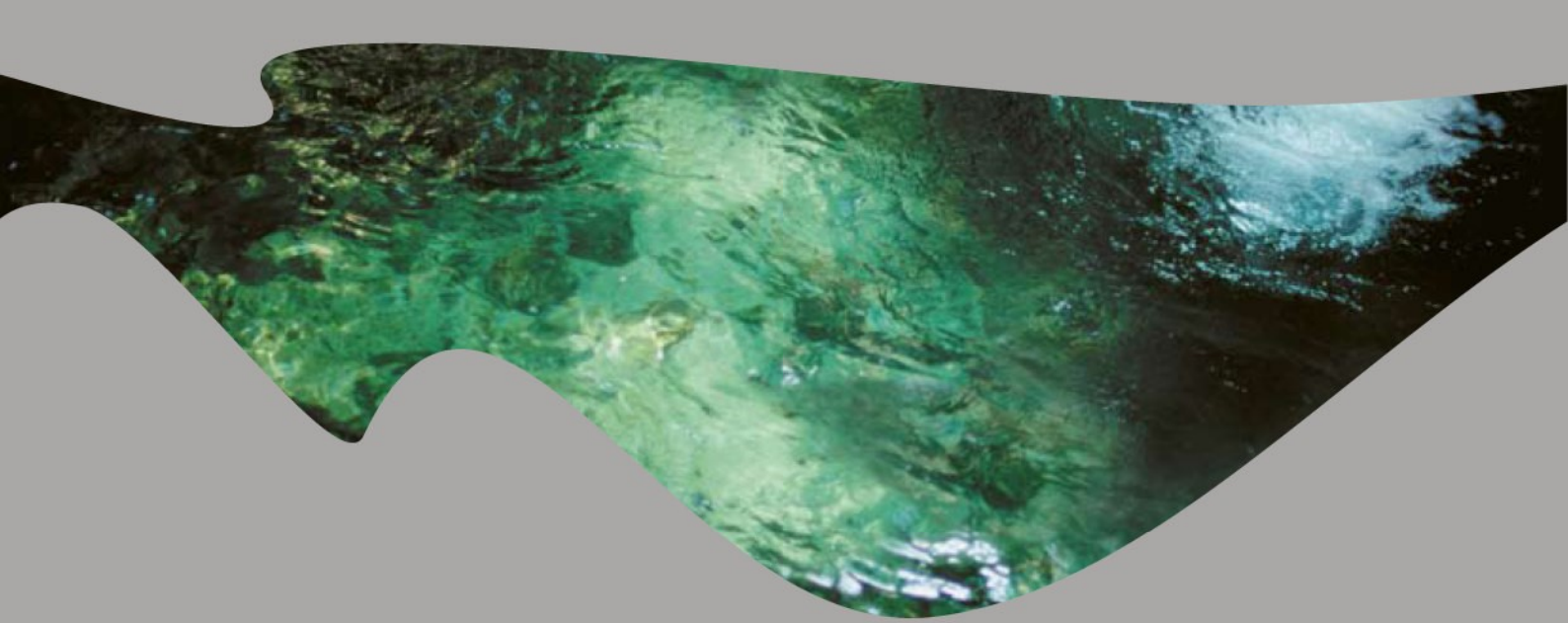

Diseñadas para conseguir los mejores resultados en los tratamientos mediante masajes, nuestras camillas ofrecen confort y relajación con formas inteligentes, que permiten recoger los aceites y el agua de los tratamientos.

Sus sistemas de elevación proporcionan un acceso confortable para el usuario, y un trabajo cómodo para el masajista, con facilidades de desplazamiento para ambos.

Con las camillas de Trautwein, los tratamientos de larga duración se convierten en un verdadero placer, y el usuario goza de un total relax hasta el final del mismo.

CAMILLA DE TRATAMIENTO ORIENT



Camillas de altura regulable para tratamientos en zonas de baño, como masaje con jabón (Hamam), ducha Vichy o Ayurveda. En la cabeza y en los pies hay agujeros de desagüe, por lo que se pueden recoger por separado los aceites de alta calidad. La zona de posición acostada está climatizada y tiene control termostático.
Colores: según nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalación (Camilla de Tratamiento Orient):

Toma de agua fría de ½" a nivel del suelo.
Toma de agua caliente de ½" a nivel del suelo.
Desagüe (NW70) con rejilla antiolores. La habitación debe diseñarse como zona de baño. Puesto que en el suelo fluye mucho agua durante el tratamiento, se recomienda instalar, además del desagüe en el suelo bajo la camilla, dos desagües a los lados de la misma.
Conexión eléctrica, longitud del cable 1.5 m, 230 V / 50 Hz, fusi-

bles en el lugar de la instalación 15 A.
Tubo de cobre 10x1 mm, a nivel del suelo.
Llave de paso del agua fría y caliente.
Instalación eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.
Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 60 cm.
Peso: 80 Kg.
Carga por superficie: 120 Kg/m².

	ORIENT	ROYAL
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2212x912 x560/860	2050x830 x550/980
Suministro eléctrico	230V / 50Hz 400W	230V / AC / 50Hz 215W



CAMILLA WELLNESS ROYAL

MESA DE MASAJE DE GRANITO



Mesa de Masaje de Granito

Lujosa y cómoda mesa diseñada especialmente para masajes con jabón (Hamam). Losa caliente de granito con ajuste termostático. Ajuste eléctrico variable de la altura desde 530 mm hasta 830 mm. Como opción, existe la posibilidad de cubrir el revestimiento lateral con bambú.

Thermo Spa Concerto

Relajación ingravida. El cuerpo experimenta una nueva ligereza. Envuelto de un cómodo calor, la ingravidez asume el control lentamente.

Colores: según nuestra carta de colores.

Módulo de bienestar Concerto:

Para masaje por ondas sonoras, conexión al sistema de audio en el lugar de la instalación. La bañera es al altavoz, el aparato no tiene altavoces. La música que suena se puede sentir y oír. El agua transfiere las vibraciones sobre la lámina hasta el cuerpo del usuario a una intensidad insospechada.

Dispositivo de masaje AquaJet:

El cuerpo casi ingravido recibe un masaje mediante 20 jets, controlados por un distribuidor electrónico. El masaje siempre empieza en los muslos, los jets se mueven a lo largo de 5 zonas, en dirección al corazón y subiendo hasta los hombros.

Requisitos en el lugar de la instalación (Thermo Spa Concerto):

Toma de pared de 230 V, 50 Hz, 2500 W. Con fusibles de 15 A.

Para el llenado es necesaria una conexión de ½" de agua fría (potable) cerca de la unidad.

Para el desagüe es necesaria una posibilidad de salida o vaciado cerca de la unidad.

El peso del sistema es de 580 Kg (de los cuales 350 litros son de agua) repartidos en 2 m².

Ancho mínimo de la puerta para la instalación: 60 cm.

Ancho mínimo del hueco: 250 cm.

Carga por superficie: 340 Kg/m².

	MESA GRANITO	THERMO SPA
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	1975x764 x530/830	2440x1087 x610/950
Suministro eléctrico	230V / 50Hz 400W	230V / 50Hz 2500W



THERMO SPA CONCERTO

CAMILLA LOMI LOMI



Camilla Lomi Lomi

Diseñada especialmente para masajes con aceite, como por ejemplo tratamientos Lomi Lomi Nui, Ayurveda...
Superficie reclinable ergonómica y bien tapizada, para adoptar la postura adecuada en posición boca abajo o boca arriba.
Superficie tapizada agradable al tacto e impermeable, para una higiene óptima.
Regulación eléctrica o hidráulica de la altura.
Colores: según nuestra carta de colores.
Color de la lámina flexible: azul.

Camilla Relax

La camilla de terapia y belleza Relax combina las ventajas de una inteligente tecnología con un exigente diseño. Proporcionando al tratamiento profesional una superficie de descanso compuesta de tres partes, consiguiendo un grado óptimo de adaptabilidad en diferentes posiciones.
Regulación eléctrica o hidráulica (opcional) de la altura.
Colores: según nuestra carta de colores.

	LOMI LOMI	RELAX
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2070x850 x550/980	2000x720 x550/980



CAMILLA RELAX

AQUA THERMOJET



Aqua ThermoJet es la combinación perfecta entre el masaje, el calor y la energía del agua. El agradable masaje del jet de agua en la cama de agua caliente alivia la tensión, conduciendo a un estado de relajación y energía renovada.

El masaje se efectúa desde los muslos hasta el cuello, siempre en esta dirección.

La superficie del masaje se divide en 6 zonas por 24 jets. Consta de tres niveles de intensidad.

Cuadro de control orientable, para un óptimo y confortable uso, desde la posición tumbada y la posición de pie.

Colores: según nuestra carta de colores.

Módulo opcional de masaje sonoro:

Para masaje por ondas sonoras, conexión al sistema de audio en el lugar de la instalación. La bañera es el altavoz, el aparato no tiene altavoces. La música que suena se puede sentir y oír. El agua transfiere las vibraciones sobre la lámina hasta el cuerpo del usuario a una intensidad insospechada.

Requisitos en el lugar de la instalación:

Carga por superficie: 140 Kg/m².

AQUATHERMOJET	
Capacidad (l)	aprox. 150
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2200x950x550
Peso (Kg)	aprox. 280 (con agua)
Suministro eléctrico	230V / 50Hz / 2000W
Fusible	1 x 15A
Nº de jets	24 (repartidos en 6 zonas)
Funcionamiento de la bomba (l/min)	400



Camilla Lady-Spa

Es una adaptación de la Thermo Spa Concerto: más pequeña para optimizar el espacio, pero con las mismas prestaciones. Debido a que se puede usar en paralelo con otros equipos resulta realmente rentable, ya que, mientras el cliente se relaja, el personal puede dedicarse a otras tareas. Ofrece opciones como los masajes acústico o AquaJet.

Como en la Thermo Spa Concerto, para el llenado es necesaria una conexión próxima de ½" de agua fría (potable), y una posibilidad de vaciado cerca para el desagüe.

Revital Wellness

Cinco almohadas rellenas de líquido, que se adaptan perfectamente al cuerpo, alcanzan la temperatura adecuada, produciendo una relajación y un bienestar excepcional. Adicionalmente, la tumbona le transmite el ritmo de la música a través del masaje de ondas y, combinando la música con la vibración, produce una sensación de intensa relajación.

La tumbona dispone de 3 programas:

- 1. Para una relajación profunda.** La respiración se adapta a un ritmo predeterminado gracias al mecanismo "oscilación de frecuencia respiratoria".
- 2. Para una sensación de intenso bienestar.** Las vibraciones, que se efectúan en dirección al corazón, aseguran la óptima regeneración y mima los sentidos.
- 3. Para olvidarse del estrés y las preocupaciones cotidianas.** Una almohada tras otra se activa en modo de vibración. Impulsos revitalizadores mejoran la sensación de bienestar físico y estimulan el sistema sensorial y motor.

La intensidad del masaje y el volumen de la música se pueden ajustar individualmente en cada programa.


Color base: blanco o negro.

Almohadas de material Alcántara en color: gris piedra, gris antracita (oscuro) o caramelo.

	LADY SPA	REVITAL WELLNESS
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	2190x950x610/850	210x765x595
Suministro eléctrico	230V / 50Hz / 2500W	230V / 50Hz / 300W
Peso (Kg)	210 / 520 (sin y con agua)	170
Capacidad de carga (Kg)	-	150
Iluminación indirecta	Opcional	Opcional
Conexión a uso por monedas	-	Opcional



REVITAL WELLNESS

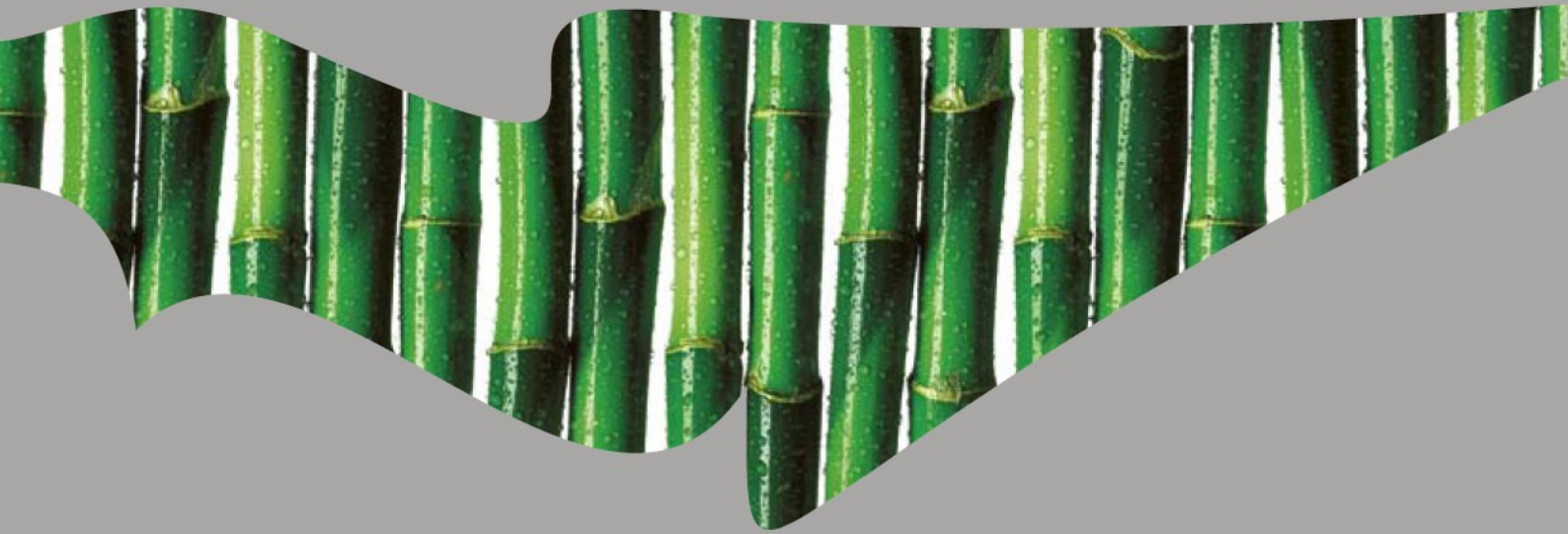

Las duchas Jet y Jacket Shower para tratamientos a presión, y la ducha Vichy para tratamientos mediante masajes, le ofrecen el máximo bienestar, gracias a las técnicas más modernas aplicadas por Trautwein, usando el agua como elemento vivificante y tonificante.

A la vez que el usuario relaja y regenera su piel, las características de las duchas Jet, Jacket Shower y Vichy las convierten en la aplicación perfecta para tratamientos de hidroterapia, indicados para mejorar la circulación sanguínea, aumentando la absorción de oxígeno y desintoxicando la piel.

VICHY 02



Duchas terapéuticas para hidroterapia, talasoterapia, tratamientos de belleza, fitness y bienestar. Los modelos Vichy 02 y Vichy 03 proporcionan una ducha agradable y relajante de cuerpo entero, que favorece la circulación sanguínea de la piel. Los resultados son: un incremento de la fuente de oxígeno y una purificación y descontaminación de la piel, reafirmandola y regenerándola.

Requisitos en el lugar de la instalación:

Vichy 02

Toma de agua fría de ¾" a nivel del alicatado.
Toma de agua caliente de ¾" a nivel del alicatado.
Desagüe de Ø70 mm.
Llave de paso del agua fría y caliente.

Vichy 03

Toma de agua fría de ½" a nivel del suelo.
Toma de agua caliente de ½" a nivel del suelo.
Conexión eléctrica en el suelo 400 V, 50 Hz, 3.2 kW, cable de 1.5 m, fusible en el lugar de la instalación de 15 A.
Desagüe con rejilla antiolores de Ø70 mm.

	VICHY 02	VICHY 03
Consumo de agua (l)	aprox. 600-1000	aprox. 50
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	1980x680x1920	1980x930x1907
Suministro eléctrico	-	230V / 50Hz 3.2kW



VICHY 03

DUCHA JET AT3275 / AT3280



Ducha Jet AT3275 / AT3280

Duchas de contrastes, para tratamientos a presión.

Requisitos en el lugar de la instalación:

- Toma de agua fría de 1" a nivel del alicatado.
- Toma de agua mezclada de 1" a nivel del alicatado.
- Toma de agua de 3/4" a nivel del alicatado.
- Desagüe de Ø100 mm.
- Llave de paso del agua fría y mezclada.
- Instalación eléctrica según DIN IEC/VDE.

Jacket Shower

12 terminales de ducha, regulables individualmente y con función de bloqueo. 1 terminal pulverizador, de cabeza.

Requisitos en el lugar de la instalación:

- Toma de agua fría de 1" a nivel del alicatado.
- Toma de agua caliente de 1" a nivel del alicatado.
- Toma de agua mezclada de 5/4" a nivel del alicatado.
- Toma de agua de 1" a nivel del alicatado.
- Desagüe de Ø70 mm.
- Llave de paso del agua fría. Llave de paso de agua caliente.

Medidas ext. (mm)
largo/prof. x ancho x alto




DUCHA JET
AT3275 / AT3280

1035x660x900

JACKET
SHOWER

800x820x2170

- 1_ Toma de agua fría de 1".
- 2_ Toma de agua caliente de 1".
- 3_ Toma de agua mezclada de 5/4".
- 4_ Toma de agua de 1".
- 5_ Desagüe Ø70 mm.
- 6_ LLave de paso del agua fría.
- 7_ LLave de paso del agua caliente.

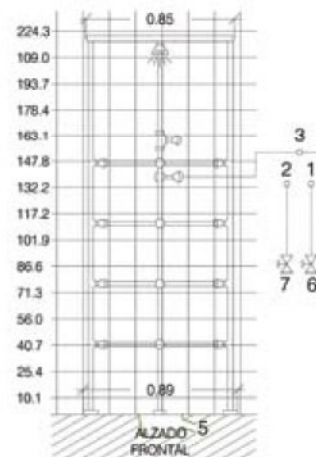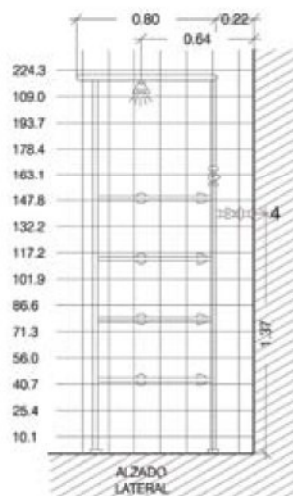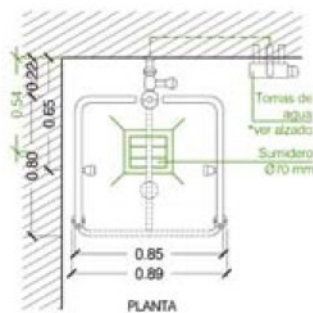

JACKET SHOWER



BAÑOS DE CONTRASTES



Baño de Contrastes de 4 Células

El baño de cuatro células proporciona multitud de posibilidades de tratamiento: baños galvánicos, equipados de serie con cuatro corrientes de impulso, así como la posibilidad de baños de contraste con el método Kneipp o baños con el método Hauff.

El equipamiento opcional WBS permite administrar baños de contraste automáticos.

Mediante un asiento giratorio se puede regular la altura óptima del usuario sentado o de pie.

	BAÑO DE 4 CÉLULAS
Medidas ext. (mm) <i>largo x ancho x alto</i>	Confirmar
Suministro eléctrico	230V / 50Hz / 0,1kW
Desagüe con tapa antiolores (diámetro)	100
Peso	100 Kg


Baño de 4 Células



Mani-Jet



Pedi-Jet

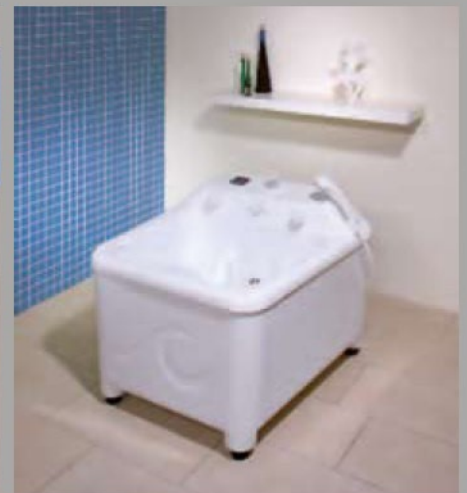

MÁQUINA DE FANGOS



Los aparatos de preparación de fango medicinal y parafina de Trautwein han demostrado su eficacia miles de veces en el sector de la termoterapia.

Trautwein ofrece para cada necesidad las medidas adecuadas para cada agitador, armario calentador y cocina de fango.

Tanto las dimensiones especiales como las formas en L o U están disponibles por encargo.

MÁQUINA DE FANGOS	AGITADOR AR 50	ARMARIO FW 4060 E
Medidas ext. (mm) <i>ancho x profundo x alto</i>	500x530x654	650x710x820
Allimentación	3 x 400V + N + T, 3,2kW, 50Hz Otros voltajes bajo pedido	230V + N + T, 1845W, 50Hz Otros voltajes bajo pedido
Tensión de trabajo	380V Trifásico	220V Monofásico

